


## Instalace a nastavení aplikace – alpha verze interní


- 1) Pokud máte vloženou Vaši emailovou adresu (google účet) v seznamu testerů, zaregistrujte se kliknutím na následující odkaz:

<https://play.google.com/apps/testing/no.telemed.diabetesdiary>


- 2) Nainstalujte si aplikaci z Google play
- 3) Aplikace Vás vyzve k přihlášení Vaším účtem Diani. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, pole pro instalační kód nechte prázdné, a klikněte na tlačítko „přihlášení“.

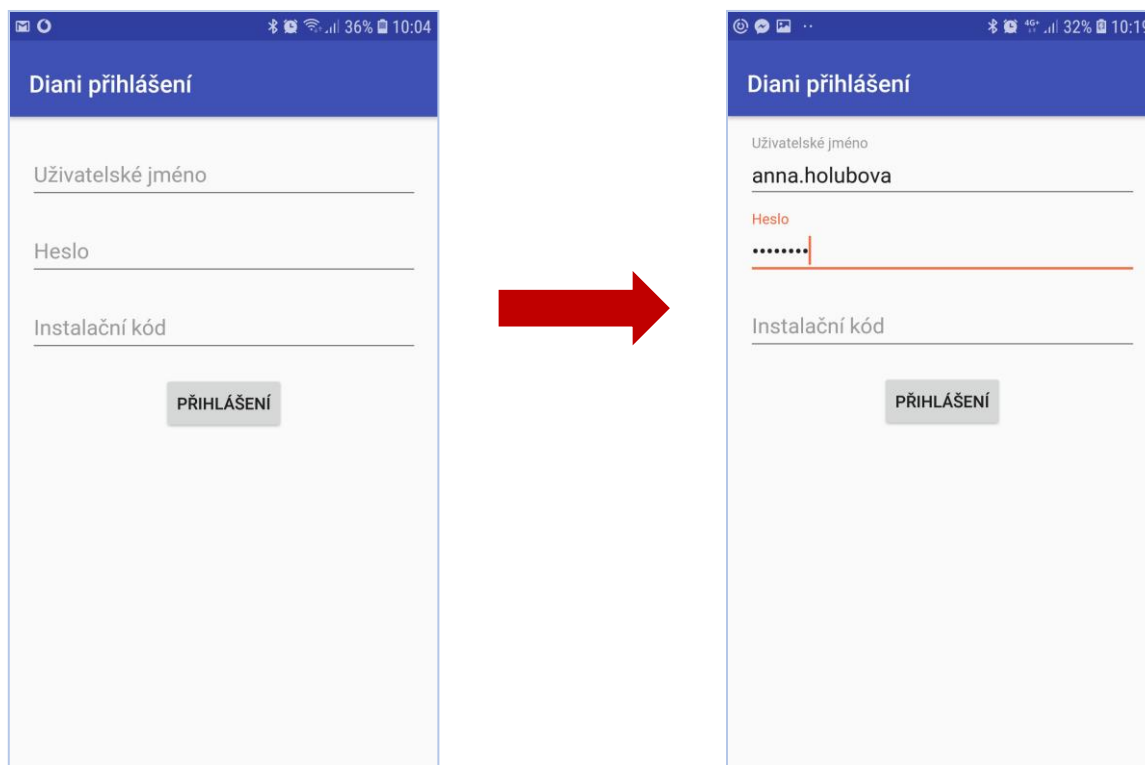

- 4) Potvrďte nalezený účet

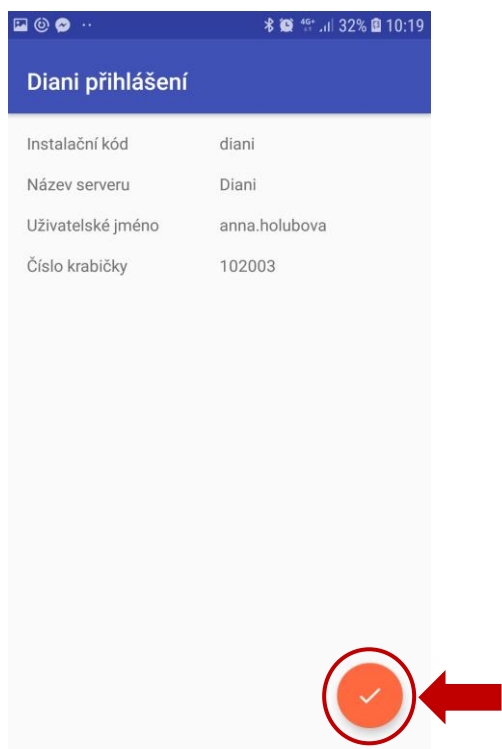

5) Přečtěte si podmínky použití a v případě souhlasu klikněte na OK.

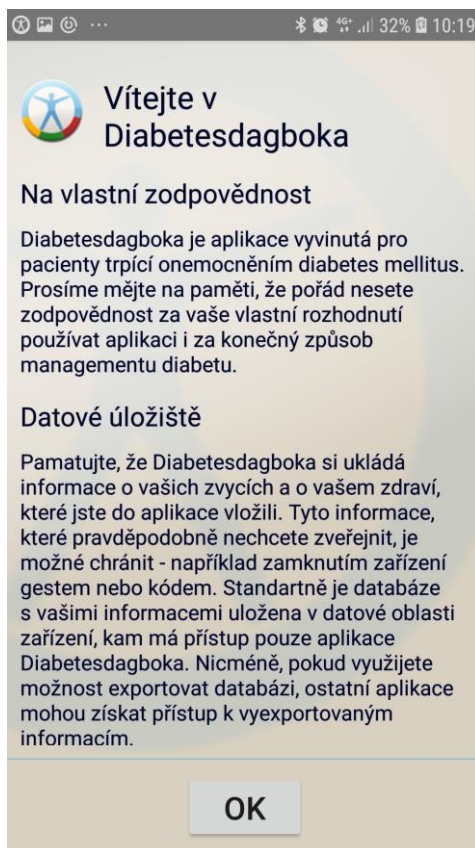


## Další možná nastavení v aplikaci

### Sledování používání aplikace

Informace o tom, jakým způsobem uživatelé manipulují s aplikací (například jak často zadávají hodnoty do deníku, v jakém pořadí vzhledem k daným parametrům, jak dlouho zadávání trvá, které funkce využívají nejčastěji apod.), je pro nás velmi cennou zpětnou vazbou pro větší přizpůsobení aplikace individuálním potřebám uživatele.

Budete-li chtít poskytnout tyto informace vývojářům, postupujte dle následujících pokynů:

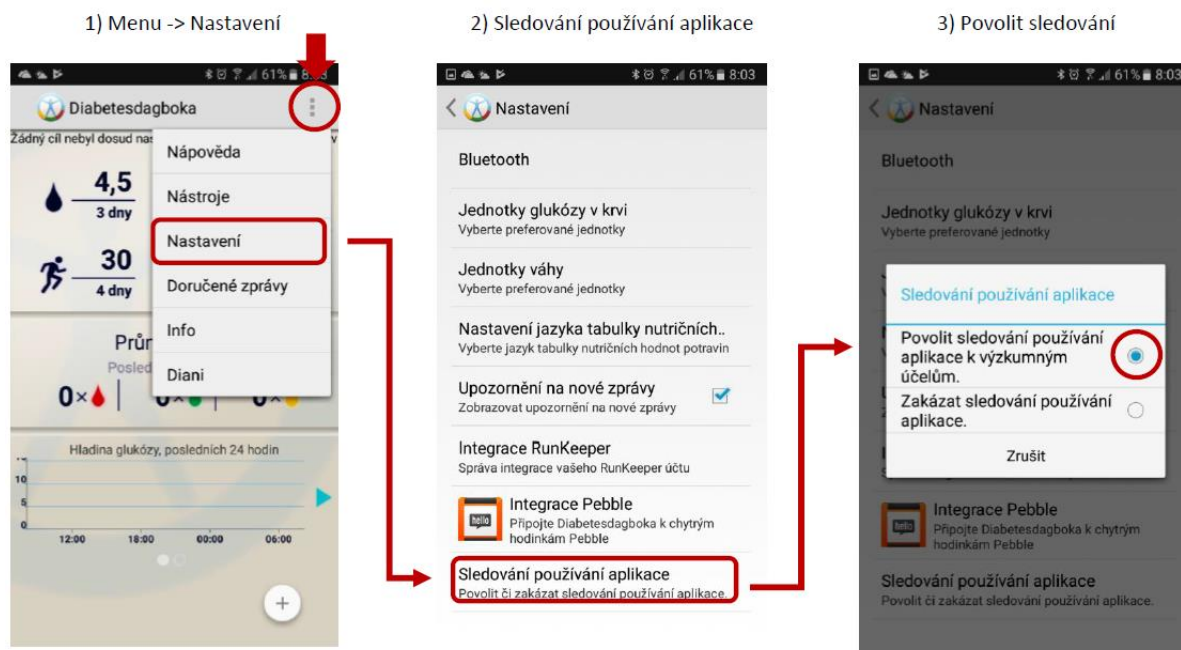

### Propojení s glukometrem FORA Diamond mini

Pokud vlastníte glukometr FORA Diamond mini, můžete ho propojit přímo s aplikací a zajistit tak automatický přenos změřených hodnot do diabetického deníku. Návod pro propojení s aplikací naleznete v příloženém souboru s návodem ke glukometru.

### Propojení s chytrými hodinkami Pebble

Aplikace Diabetesdagboka existuje i ve verzi pro Pebble hodinky. Skrze ně pak můžete zadávat hodnoty do deníku v telefonu, kam se automaticky přenesou v čas zadání na hodinkách. V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.


## Jak funguje synchronizace dat mezi více zařízeními

K synchronizaci dochází vždy:

- při spuštění aplikace Diabetesdagboka
- za 2 minuty od posledního zadaného nebo zeditovaného záznamu
- po manuálním vynucení synchronizace gestem (přejetí prstem shora dolů na hlavní stránce či v historii záznamů)

Synchronizace je indikována kroužícím kolečkem na displeji

### Signalizace probíhající synchronizace záznamů

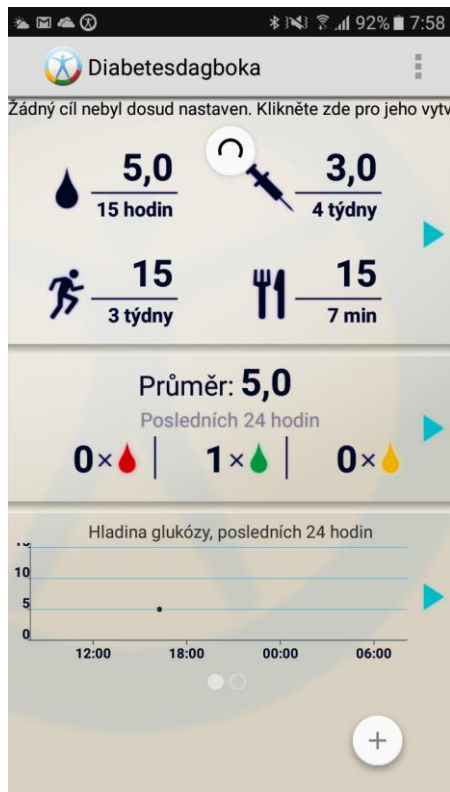

### Vynucení synchronizace gestem

